


ドリームステーション Auto CPAP装置の使い方


※本書は取扱説明書に代わるものではありません。必ず添付文書および取扱説明書をお読みになり、警告、注意事項等をご理解の上、正しくご使用ください。

1 CPAP装置 各部の説明

前面パネル

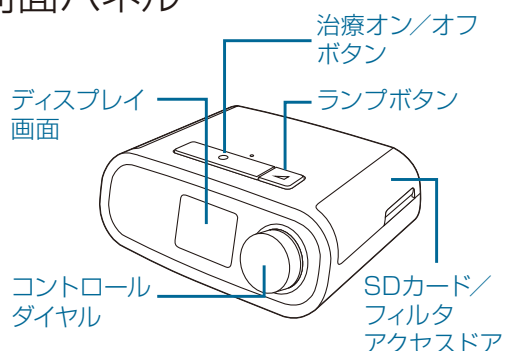


機器背面

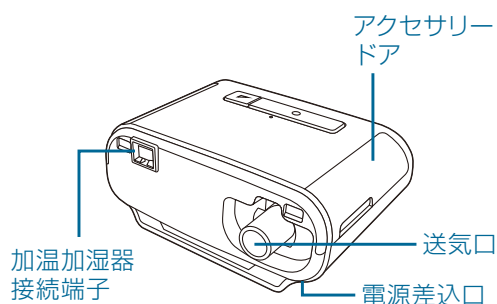

2 備品の取付け

※ご使用の際は、以下の備品がセットされていることを確認してください。

SDカード/フィルタ アクセスドアを開きます。

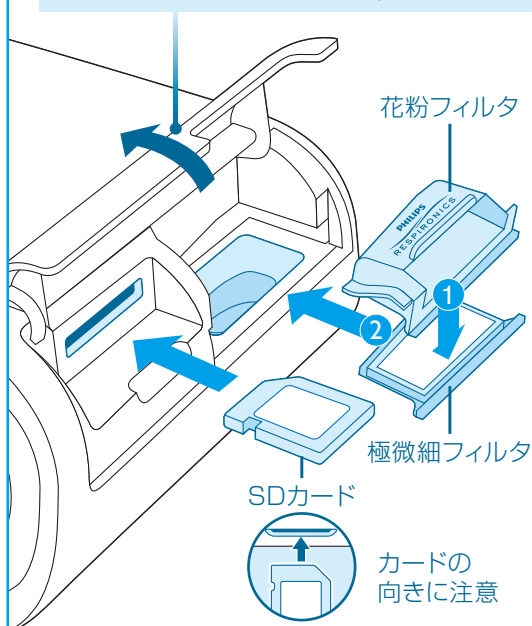

フィルタの取り付け

左図のように花粉フィルタを極微細フィルタの上に乗せ、一体化してからセットします。

※花粉症の方には極微細フィルタ(オプション)をおすすめします。極微細フィルタは使い捨てです。

SDカードの取り付け

機器使用前に、左図を参考にSDカードを挿し込みます。

※SDカードは指定の医療機器にのみご使用ください。

データ転送中と表示されている間はSDカードを抜いたり電源を切らないでください。




SDカード/フィルタ アクセスドアを閉じます。

3 機器本体の準備


1

機器の設置

機器をしっかりとした平らな台などに置きます。

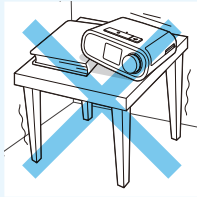


フィルタ部(空気取込み口)がカーテン布などでふさがれていないか確認してください。

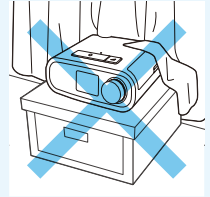

2

機器と電源コード・電源アダプタの接続

電源アダプタのコネクタを、機器側面の電源差込口に差し込みます。電源コードと電源アダプタを図のように接続し、電源コードをコンセントに差し込みます。

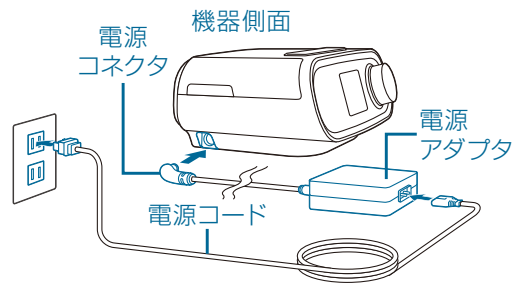

注意

電源コード及び電源アダプタのコードは、過度の曲げや、ねじり、束ねなどによって断線し、発熱・発火におよぶ可能性があります。ご使用前には必ず破損がないことをご確認ください。



3

機器と呼吸回路の接続

呼吸回路の一方を機器背面の送気口に接続し、もう一方をマスクに接続します。マスクを鼻にあてヘッドギアで固定します。

回路を接続する時は…

- ① 送気口を覆うようにあて
- ② 奥まで差し込むと簡単に接続することができます。

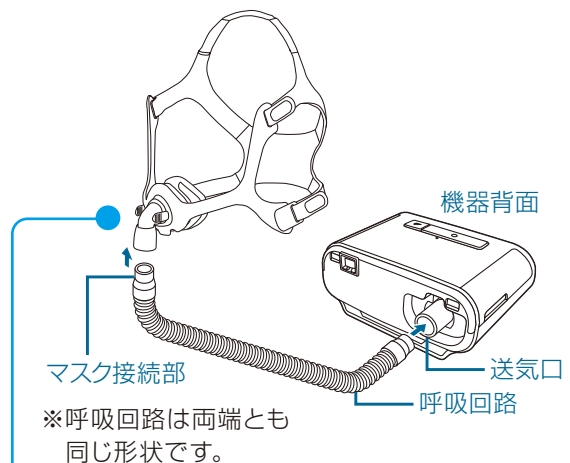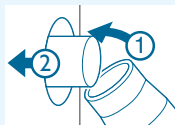




呼吸ポートは、ユーザーの呼吸を逃がすためにあります。呼吸ポートは塞がないでください。

4 治療の開始と終了

送気の開始

機器上部にある 治療オン/オフ ボタンを押すと送気が始まります。空気が送られてきたら口を閉じて、鼻だけで呼吸してください。

機器上部

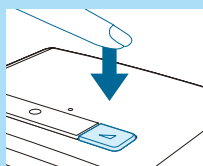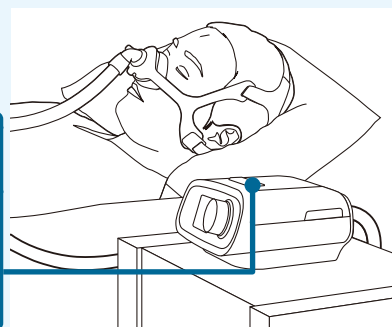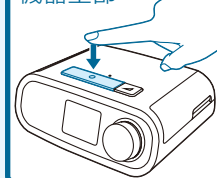

ランプボタン


使用中に息が吐きづらく感じた時に押します。ランプボタンを押すと送気が最小ランプ圧まで下がり、徐々に治療圧まで上昇します。

※ランプ圧は、医師の処方にて設定されています。

送気の停止


動作中に治療オン/オフボタンを押すと、送気が止まります。

機器上部

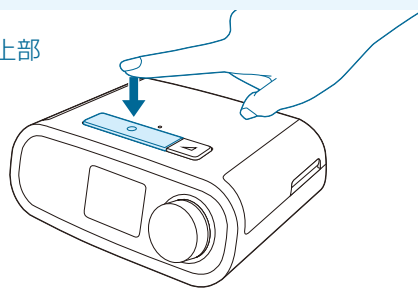

機器を使用しない間（日中など）は、電源コードはコンセントから抜いておくことをおすすめします。また、機器・呼吸回路・マスクなどは直射日光を避け、ホコリのかからない場所で保管してください。データ転送中と表示されている間はSDカードを抜いたり電源を切らないでください。

ディスプレイ画面のアイコン

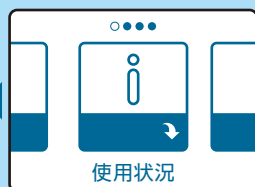

使用状況

治療の状況を閲覧
することができます。



予熱機能

治療開始前に加温
加湿器を温めて
おくことができます。



機器情報

医療従事者が一部
の設定を変更する
ことができます。



ユーザー設定

必要に応じて調整
可能な設定が表示
されます。^{*1}

^{*1}: 医療従事者の設定によって、患者さんでは変更できない項目があります。


5 加温加湿器の組み立て・使用手順

※加温加湿器をご使用いただくには医師の処方が必要となります。




付属の取扱説明書を参照し、付属品がすべてそろっていることを確認してください。

1

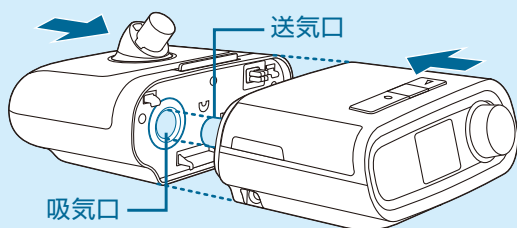


CPAP装置の送気口と加温加湿器の吸気口を重ねて並べ、カチッと音がするまで押し合わせます。

2

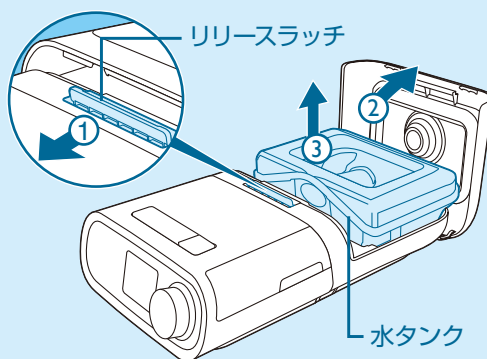

上部のリリースラッチを本体側に引き加温加湿器のカバーを開いて、水タンクを取り出します。


3

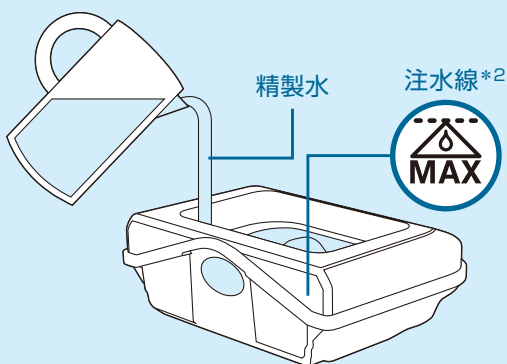

精製水(蒸留水)を注水してから加温加湿器にセットします。

*2 注水する際は、注水線のマーク  を超えないようにご注意ください。


4

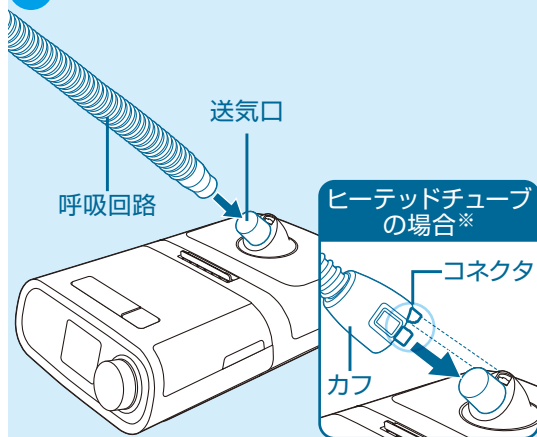

呼吸回路を加温加湿器の上部にある送気口にしっかり接続します。


※ヒーテッドチューブの場合は、カフのコネクタを送気口に合わせて接続します。

※ヒーテッドチューブはオプションです。

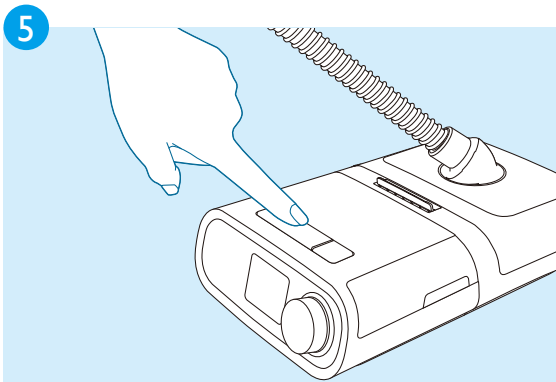


機器の送気をオンにして治療を開始します。加温加湿器は機器本体に連動して、自動で作動します。

3 4 の項目を参照してください。

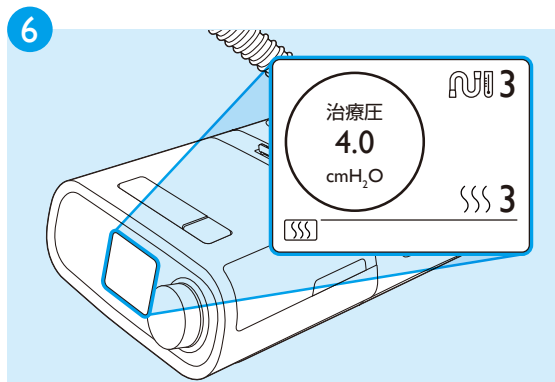

機器の送気を開始すると、ディスプレイ画面に加湿器設定アイコンSSSが表示されます。

※ヒートドチューブを使用している場合、右上に回路温度設定 ∞ 3 も表示されます。

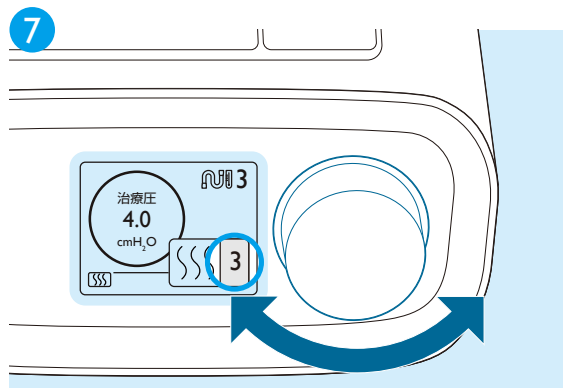


機器のコントロールダイヤルを回し、それぞれ医師から処方された処方値に数字をあわせます。

！ ご注意ください

- ・ 加温加湿器の水タンクには、可能な限り精製水（蒸留水）を使用することを推奨します。
- ・ 使用する前に必ず水タンクの水量を確認してください。
- ・ 水道水を使用する場合は、月1回以上の頻度で酢を使用した洗浄を推奨します。

加温加湿器を本体から取り外す際は…







加温加湿器のヒータープレートと水を約15分間冷ましてから水タンクを取り外します。加温加湿器の側面にある加温加湿器取り外しボタンを押しながら、機器本体と加温加湿器を引き離し、取り外します。



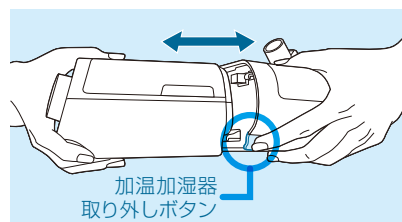


警告 水タンクを取り外す前には、約15分間加温加湿器のヒータープレートと水を冷ましてください。ヒータープレート、熱湯、または水タンクの金属部に触れると、やけどする恐れがあります。また、カビや細菌の繁殖を防ぐため、水タンクに残った水は毎日捨てて、空にして洗浄してください。


6 機器と付属品のお手入れ

機器および付属品は、それぞれお手入れの方法やその周期が異なります。
安全・快適にお使いいただくために、以下のお手入れを行ってください。

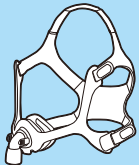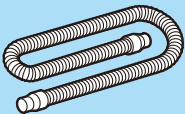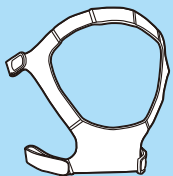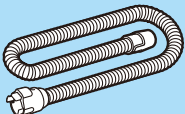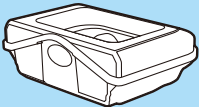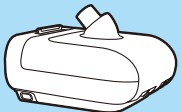
頻度	種類	お手入れ方法
毎日	 マスク	各部品を分解し、中性洗剤を薄めたぬるま湯で洗浄します。 よくすすぎ、風通しの良い所で陰干しします。
	 スタンダードチューブ	中性洗剤を薄めたぬるま湯で洗浄します。その後よくすすぎ、風通しの良い所で陰干しします。
1週間	 ヘッドギア	マスクから外して中性洗剤を薄めたぬるま湯でもみ洗いします。洗たく機を使用する際は洗たく用ネットに入れます。
	 ヒートッドチューブ	中性洗剤を薄めたぬるま湯で洗浄します。その後よくすすぎ、風通しの良い所で陰干しします。
	 水タンク	手洗いの場合でも食器洗浄機を使用する場合でも、中性洗剤を薄めたぬるま湯で洗浄します。必ずきれいな水ですすぎ、乾いた布で水気を拭き取り陰干しします。
	 加温加湿器 本体	湿った布で表面を拭きます。 送気口の内側は、市販のビン用ブラシや布でクリーニングします。

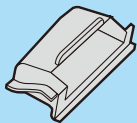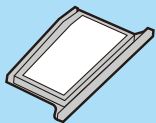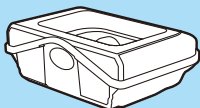頻度	種類	お手入れ方法
1ヶ月	 花粉フィルタ	花粉フィルタは6ヶ月ごとに交換してください。 使用後は、ぬるま湯で洗浄し、陰干ししてください。 フィルタは必ず乾かしてからお使いください。
	 極微細フィルタ (オプション)	極微細フィルタ (オプション) は30日間使用後、または 汚れが目立つ場合に交換してください。使い捨てですの で洗浄せず新しいフィルタをお使いください。
	 水タンク ※水道水を使用 した場合	加温加湿器の水タンクに水道水を補給する場合は、次の 手順に沿って水タンクをメンテナンスしてください。 この作業は月に1回以上の頻度で、必要に応じて行って ください。 • 水タンクを加温加湿器から取り外し、水を含ませた布で 水タンク内部を拭き、ゴミなどを取り除く。 • 希釈していない5%酢酸溶液に最低4時間、または水 タンクの水垢が取り除かれていることが目視で確認で きるまで浸し、十分にすすいでから自然乾燥させます。
警告 水タンクを取り外す前には、約15分間加温加湿器のヒータープレートと水を冷まします。ヒータープレートやお湯、水タンクの金属部品に触れると火傷を負うおそれがあります。		

⚠️ お手入れの際は次の点にご注意ください

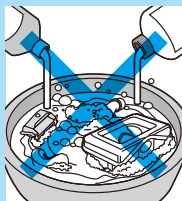

マスクや呼吸回路をベンジン、アルコール、塩素系洗剤などで洗わないでください。

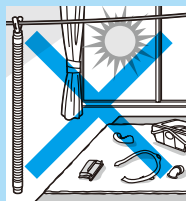

マスクや呼吸回路は、日当りの良い場所で干さないでください。

販売名：ドリームステーション Auto
承認番号：30200BZX00299000
高度管理医療機器 / 特定保守管理医療機器

改良などの理由により予告なしに意匠、仕様の一部を変更することがあります。あらかじめご了承ください。
記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。



テイジン
CPAPカスタマーセンター

フリーダイヤル：**0120-365-474**
〔受付時間〕 10:00～22:00

CPAPユーザー向け情報提供サービス

CPARTNERS
—— シーパートナーズ ——

<https://cpartners.teijin-pharma.co.jp>



製造販売業者 **株式会社フィリップス・ジャパン**

販 売 業 者 **帝人ファーマ株式会社**



P138X12310-04

医療機器

THC-SAS025-TB-2207-5
2022年7月改訂