
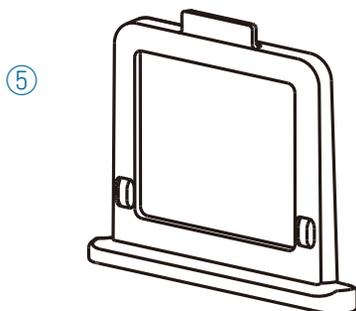
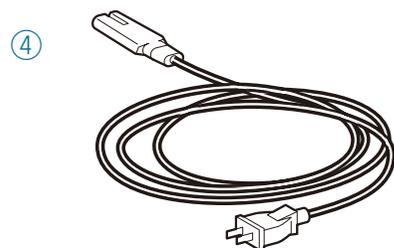


# ドリームステーション Go CPAP装置の使い方


※本書は取扱説明書に代わるものではありません。必ず添付文書および取扱説明書をお読みになり、警告、注意事項等をご理解の上、正しくご使用ください。

## 1 システムの内容物

- ①装置本体
- ②取扱説明書
- ③チューブ
- ④AC電源コード
- ⑤リユーザブル花粉フィルタ
- ⑥ディスポーザブル極微細フィルタ(オプション)


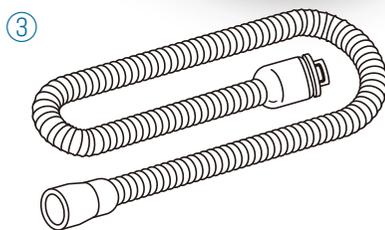


リユーザブル花粉フィルタ

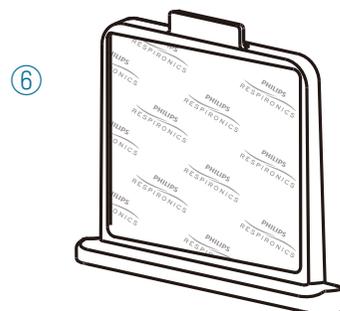

ディスポーザブル極微細フィルタ

## 2 CPAP装置 各部の説明

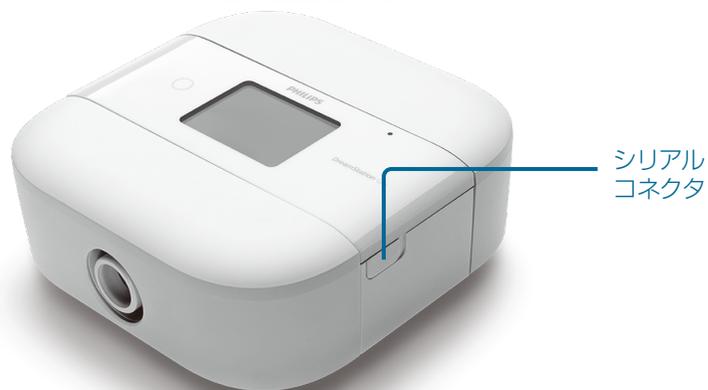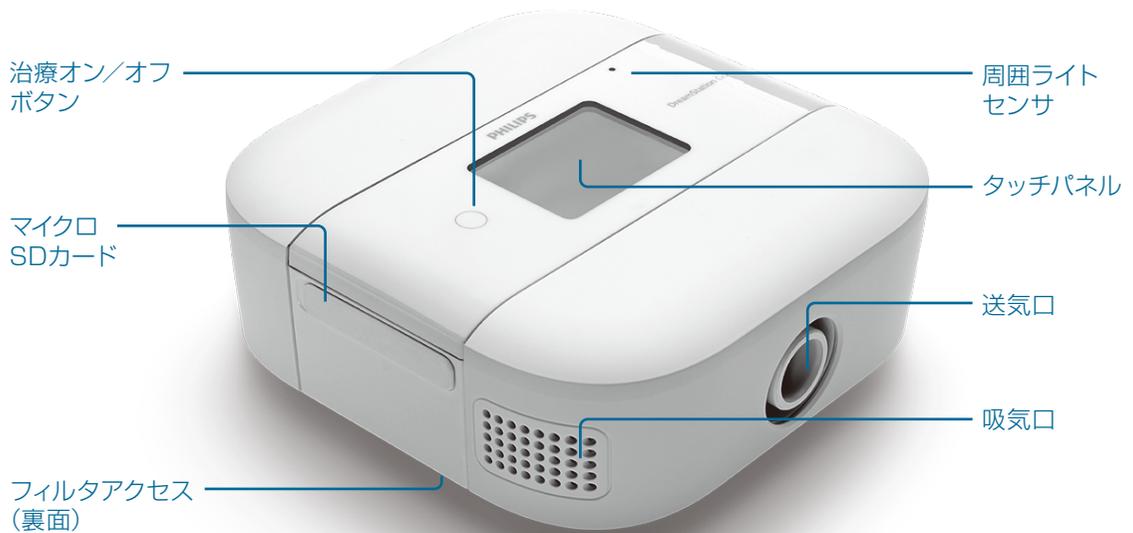


### 注意

機器はしっかりした平らな台などに置きます。冷暖房器具（送気排気口、ラジエータ、エアコンなど）から離れた場所に配置してください。


※ご使用の際は、以下の備品がセットされていることを確認してください。

### フィルタの取付け／取り外し

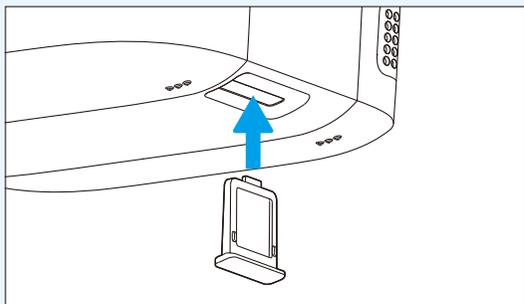

#### 取付け

フィルタを挿入口にセットします。

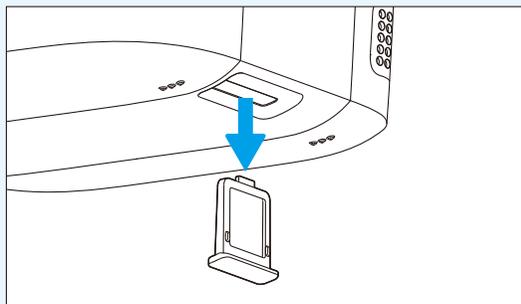


#### 取り外し

フィルタの突起部を掴んで取り外します。


※花粉症の方には極微細フィルタ(オプション)をおすすめします。極微細フィルタは使い捨てです。

### マイクロSDカードの取付け／取り外し

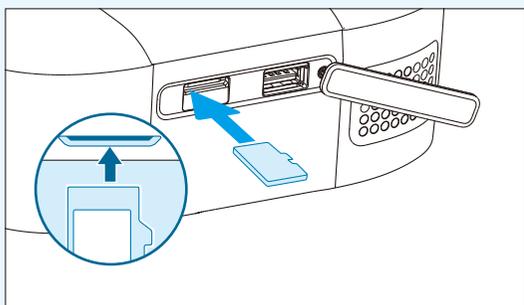

#### 取付け

カードの向きに注意し、まっすぐ平行にカード挿入口に差し込みます。

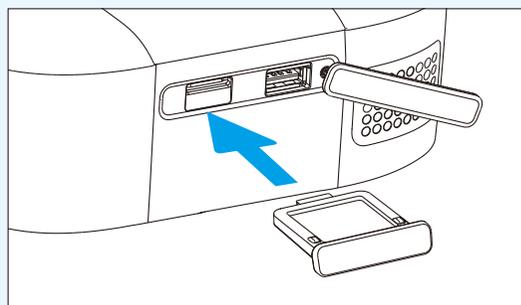


#### 取り外し

フィルタの突起部でカードを押し込むと機器から取り出せます。

※マイクロSDカードは指定の医療機器にのみご使用ください。

タッチパネルに右図のアイコンが表示されている間はマイクロSDカードを抜いたり電源を切らないでください。

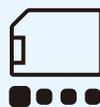

## 4 機器本体の準備

1

### 機器と電源コードの接続

電源コードのコネクタ側を機器側面の電源差込口に差し込みます。電源コードのプラグ側をコンセントに差し込みます。





**注意** 電源コードは、過度の曲げや、ねじり、束ねなどによって断線し、発熱・発火におよぶ可能性があります。ご使用前には必ず破損がないことをご確認ください。

2

### 機器とチューブの接続

チューブの一方を機器背面の送気口に接続し、もう一方をマスクに接続します。マスクを鼻にあてヘッドギアで固定します。

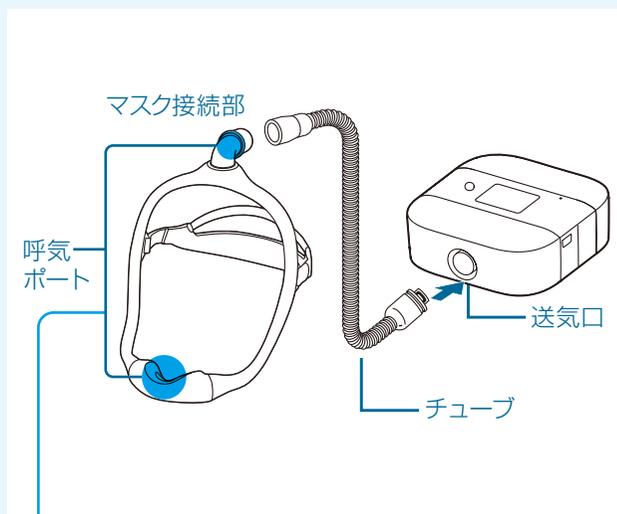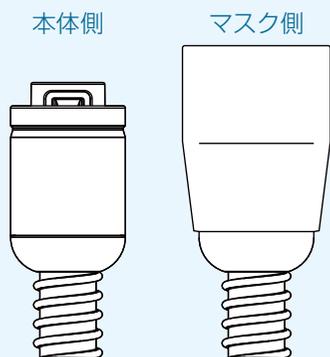

呼気ポートは、ユーザーの呼気を逃がすためにあります。呼気ポートは塞がないでご利用ください。

## 5 治療の開始と終了

### 送気の開始

機器上部にある 治療オン/オフボタンを押すと送気が始まります。空気が送られてきたら口を閉じて、鼻だけで呼吸してください。治療中はオン/オフボタン周囲のLEDの色が白から青に変わります。

治療  
オン/オフボタン



タッチパネル



### ランプ機能

使用中に息が吐きづらく感じた時に押します。ランプアイコン  を押すと送気が最小ランプ圧まで下がり、徐々に治療圧まで上昇します。

※ランプ圧は、医師の処方にて設定されています。

### 送気の停止

動作中に治療オン/オフボタンを押すと、送気が止まります。

**タッチパネルが消えている時は…**

タッチパネルに一度触れて、画面を起動させてから治療オン/オフボタンを押します。

治療  
オン/オフボタン




タッチパネル

機器を使用しない間（日中など）は、電源コードはコンセントから抜いておくことをおすすめします。また、機器・チューブ・マスクなどは直射日光を避け、ホコリのかからない場所で保管してください。データ転送中と表示されている間はマイクロSDカードを抜いたり電源を切らないでください。

## ディスプレイ画面のアイコン

ホーム画面から以下の4つのオプションをスクロールできます。

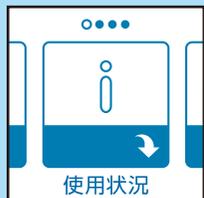

### 使用状況

治療の状況を閲覧することができます。



### ユーザー設定

変更可能な機能設定が表示されます。



### その他設定

必要に応じて調整可能な設定が表示されます。<sup>\*1</sup>





### サポート情報



機器の情報を確認することができます。

\*1: 医療従事者の設定によって、患者さんでは変更できない項目があります。

## 6 機器と付属品のお手入れ

機器および付属品は、それぞれお手入れの方法やその周期が異なります。安全・快適にお使いいただくために、以下のお手入れを行ってください。

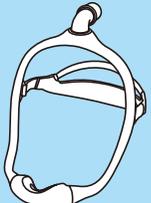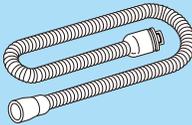
頻度	種類	お手入れ方法
毎日	 マスク	各部品を分解し、 中性洗剤を薄めたぬるま湯で洗浄します。 よくすすぎ、風通しの良い所で陰干しします。
	 チューブ	中性洗剤を薄めたぬるま湯で洗浄します。 よくすすぎ、風通しの良い所で 陰干しします。
1週間	 ヘッドギア	マスクから外して中性洗剤を薄めた ぬるま湯でもみ洗いします。 洗たく機を使用する際は 洗たく用ネットに入れます。

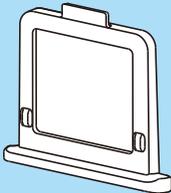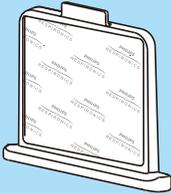頻度	種類	お手入れ方法
2週間	 花粉フィルタ	花粉フィルタは2週間に一度、ぬるま湯で洗浄し、陰干ししてください。 フィルタは必ず乾いている物をお使いください。 6ヶ月ごとに交換してください。
1ヶ月	 極微細フィルタ	極微細フィルタ(オプション)は30日間使用后、または汚れが目立つ場合に交換してください。 使い捨てですので、洗浄せず新しいフィルタをお使いください。

### ⚠️ お手入れの際は次の点にご注意ください



マスクやチューブをベンジン、アルコール、塩素系洗剤などで洗わないでください。

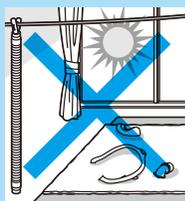

マスクやチューブは、日当りの良い場所で干さないでください。

販売名:ドリームステーション Go  
医療機器認証番号:301AFBZX00071000  
または 230AABZX00088000  
指定高度管理医療機器 / 特定保守管理医療機器

改良などの理由により予告なしに意匠、仕様の一部を変更することがあります。あらかじめご了承ください。  
記載されている製品名などの固有名詞は、Philips、Respironics、またはその他の会社の商標または登録商標です。

製造販売業者  
**株式会社フィリップス・ジャパン**

販売業者  
**帝人ファーマ株式会社**

 **テイジン**  
CPAP Customer Center **CPAPカスタマーセンター**

フリーダイヤル: **0120-365-474**  
[受付時間] 10:00 ~ 22:00

CPAPユーザー向け情報提供サービス

**CPARTNERS**  
シーパートナーズ

<https://cpartners.teijin-pharma.co.jp>



P144X12310-03  
SAS034-TB-2009-2